



Miaomiaose


Краткое руководство пользователя

1. Отсканируйте код



Отсканируйте QR-код для загрузки и установки мобильного приложения Miaomiaose

2. Подключение

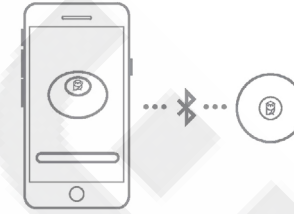

Достаньте термометр, запустите приложение Miaomiaose, нажмите на кнопку на экране для подключения

3. Измерение температуры




Наклейте двустороннюю клейкую ленту на нижнюю часть термометра и наклейте его на место измерения температуры* начните измерения

Рекомендуемое место для измерения температуры

- Из-за разницы температуры различных частей тела, для более точного измерения рекомендуется наклеить термометр на впадину снизу середины груди (смотрите рисунок справа).
- Перед началом измерения температуры, для создания более лучшего контакта термометра с кожей, слегка нажмите на корпус термометра в течение 3-5 секунд.

Внимание!

- У новорожденных до 6 месяцев очень нежная кожа, поэтому для осуществления измерения температуры не рекомендуется наклеивать термометр. Используйте подгузник для закрепления термометра и убедитесь что термочувствительная пластина тесно прилегает к паховой зоны.

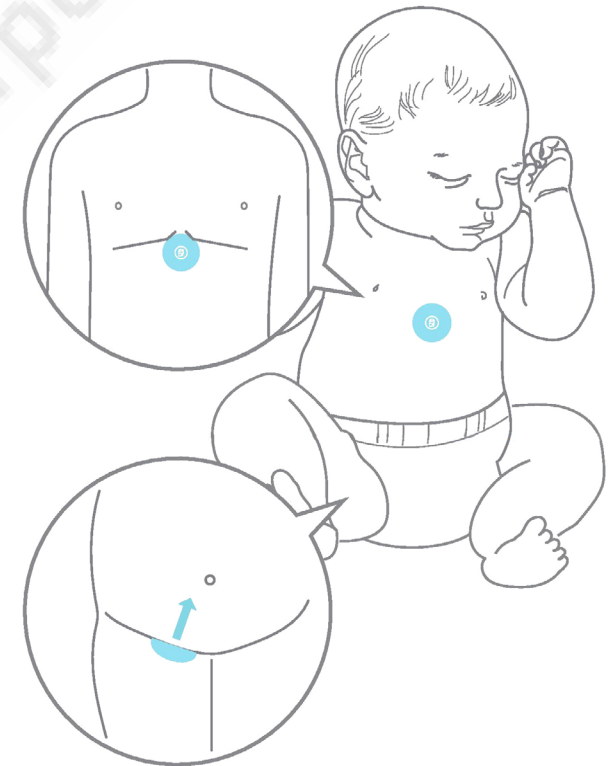


- Во время измерения температуры, на телефоне должен быть включен звук, мобильное приложение должно работать в активном режиме (не блокируйте экран и не переводите приложение в фоновый режим).
- Во время измерения температуры в течение ночи, во избежание разрядки батареи и невозможности получать оповещения, рекомендуем Вам подключать смартфон к зарядному устройству.
- После окончания измерения температуры, для уменьшения разряда батареи поместите термометр в камеру для хранения.


Как осуществить дистанционное измерение?

Шаг 1. Добавьте друга с аккаунтом Xiaomi



1. Нажмите на иконку «⋮» в правом верхнем углу меню и выберите опцию «Личный кабинет»

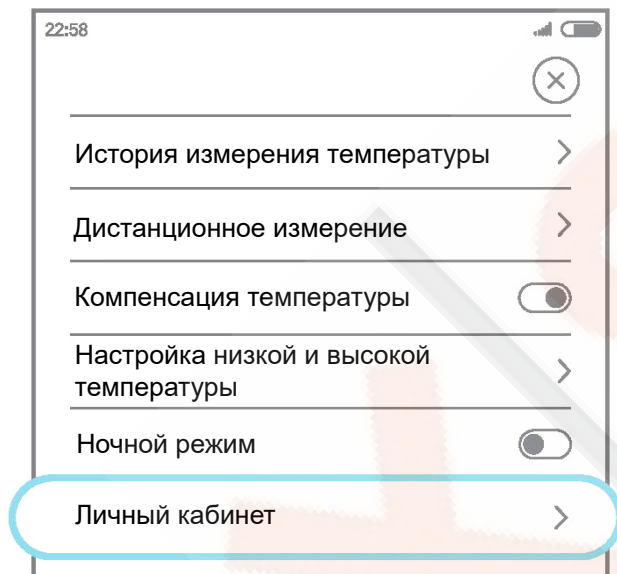

2. Нажмите на опцию «Друзья» для перехода в список друзей

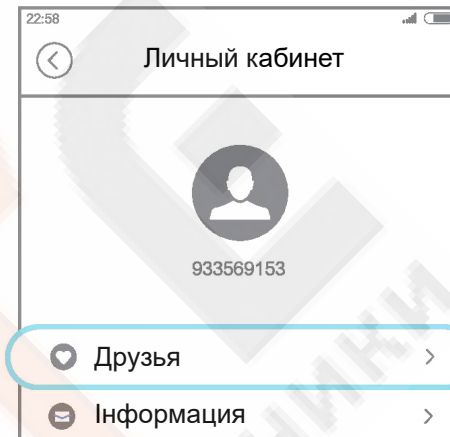


3. Нажмите на иконку «⋮» в правом верхнем углу меню «Друзья» и выберите метод добавления аккаунта друга

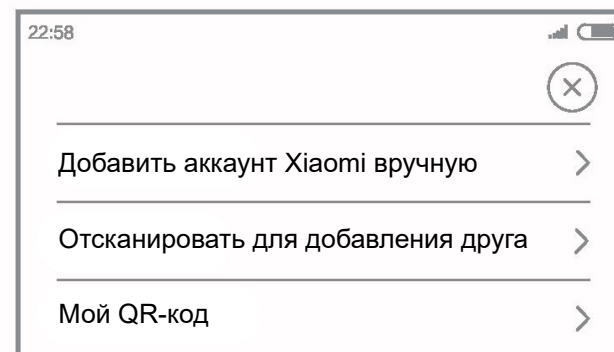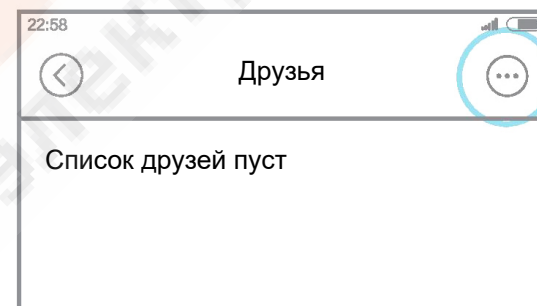


Шаг 2. Начните дистанционное измерение

4. Натисніть на іконку «☰» в верхнем правом углу меню и выберите пункт «Дистанционное измерение»

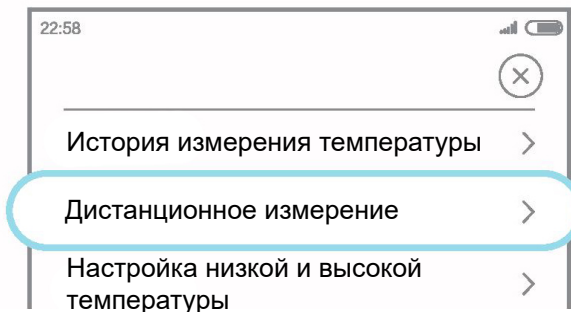

5. Выберите аккаунт для осуществления дистанционного измерения

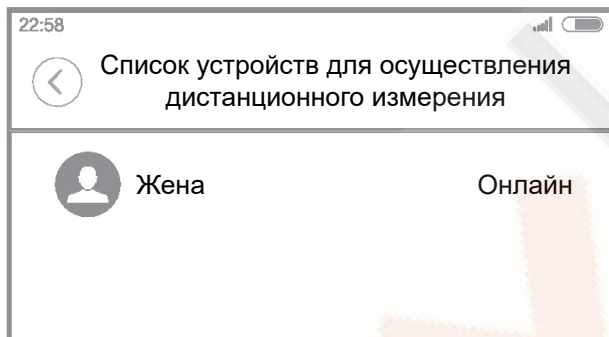


Примечание: ниже указано инструкции по настройке функции компенсации температуры, знакомиться с данной функцией не обязательно. В данном продукте используется адаптивный расчет температуры, подходит для большинства лиц и условий измерения, если результат измерения отличается от фактической температуры, выполните следующие шаги для компенсации температуры.


Как выполнить компенсацию температуры?

1. Приклейте термометр Miootiaose к середине груди, запустите приложение Miootiaose и подключитесь к термометру


2. С помощью обычного термометра измеряйте температуру под мышкой в течении 10 минут, запомните результат измерения

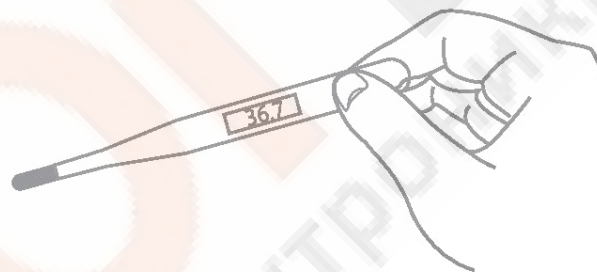


3. Нажмите на иконку «☰» в верхнем правом углу меню, включите функцию «Компенсации температуры»

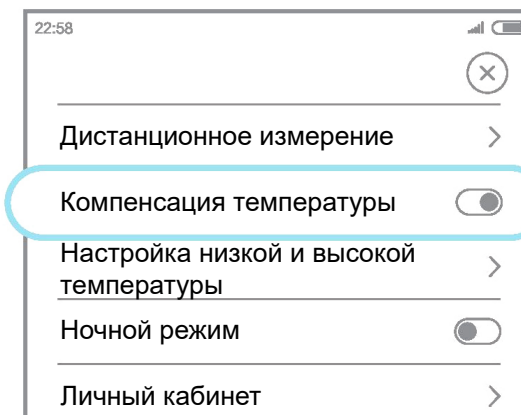

4. Вернитесь на главный экран измерения, нажмите на кнопку компенсации температуры « \pm »

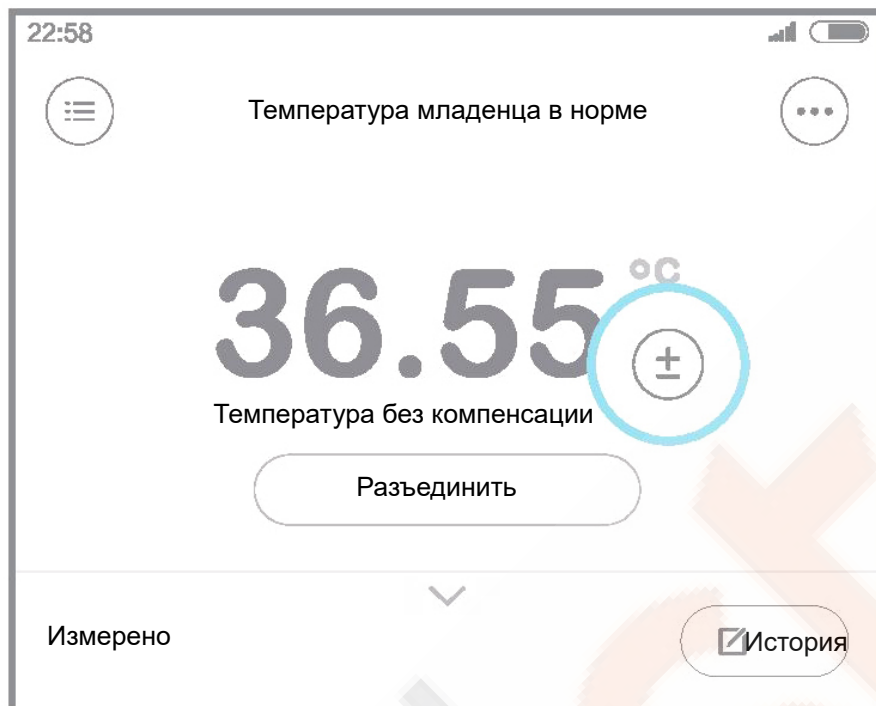

6. После стабилизации измеряемой температуры, будет отображена температура с учетом компенсации

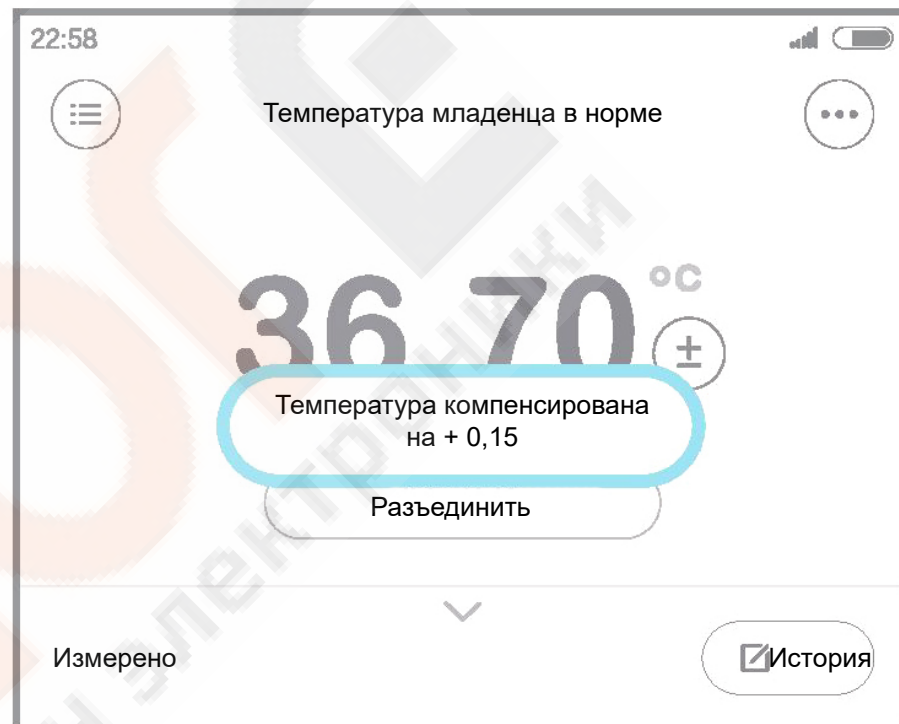

5. Нажмите на область отображения температуры, введите результаты измерения обычным термометром.

